



PHILIPS

Astmabehandling

Hjälper dig att behålla **kontrollen över astman**

I den här guiden finns information om Philips olika lösningar för Astmabehandling. De hjälper dig att hantera din astma så att du kan fokusera på det viktigaste – att njuta av livet.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om astmaprodukter som dessa kan hjälpa dig att behålla kontrollen.



Philips OptiChamber Diamond

ventilförsedd andningsbehållare



En spacer är ett rörformat tillbehör som kopplas ihop med en inhalator. Den hjälper till att få ned mer läkemedel till lungorna, där det behövs. En ventilförsedd andningsbehållare är en spacer med ventiler som håller kvar aerosolen en kort stund. Ventilerna öppnas när du andas in och släpper igenom läkemedlet.

OptiChamber Diamond är diskret, bärbar och såpass liten att du kan ta den med dig.

- OptiChamber Diamond har utformats för att förbättra tillförseln av läkemedel. Den antistatiska kammaren håller kvar aerosolen längre så att du får mer tid att andas in din medicin^{2,3}
- Ventiler med lågt motstånd gör det lätt att andas genom kammaren även vid låg flödeshastighet³
- Utandningsventilen rör sig så att du kan se när ditt barn andas ut. Det gör det enklare att tajma att ge läkemedel när ditt barn andas in²



Philips PersonalBest PEF-mätare



En toppflödesmätare, även kallad PEF-mätare, är en billig, bärbar, handhållen enhet som används för att mäta hur väl luften rör sig ut ur dina lungor. Att mäta ditt toppflöde med den här mätaren är en viktig del av hanteringen av dina astmasymtom och för att förhindra astmaattacker. Den bör utgöra en del av din personliga Astmabehandlingsplan.⁴

Lätt, komplett och bärbar. Med PersonalBest ligger PEF-mätningen i dina händer, närhelst du behöver den.

- Färgkodad mätning i 3 zoner hjälper dig att övervaka astman.
- Ett utvikbart handtag håller dina fingrar borta från indikatorn, och hjälper även till att ge en bra teknik med lyckad avläsning.
- Det utvikbara handtaget förvandlas till ett stabilt fodral som skyddar din mätare.



Philips InnoSpire nebulisatorer



Om ditt barn har fått flytande läkemedel utskrivet för inhalering används nebulisatorn för att förvandla vätskan till en fin dimma. Det gör att läkemedlet lättare når djupt ned i lungorna där det ger bäst effekt.

InnoSpire-produkterna är snabba, effektiva och pålitliga bärbara eller fasta nebulisatorer som kan ge behandling på så lite som 4 minuter.⁵

- InnoSpire Elegance, Essence och Deluxe är utformade för att användas hemma
- InnoSpire Go och Mini ger dig bärbar nebulisatorbehandling
- SideStream nebulisatorer används med Elegance, Essence, Deluxe, Mini och båda Philips pediatrika nebulisatorer. De är mycket effektiva och kan användas för att nebulisera de flesta vanligt förekommande läkemedlen för sjukdomar i andningsorganen




Philips Pediatrika nebulisatorer



Två kärleksfullt utformade karaktärer som ger ditt barn en pålitlig, snabb och lättanvänd behandling på så lite som 6 minuter.⁵

- Vänliga karaktärer som är utformade för att uppmuntra barnen att ta sin medicin
- Pålitlig nebulisatorbehandling som bygger på över 30 års erfarenhet
- Stabil, lätt och lättanvänd – en perfekt kombination för barn

Philips LiteTouch masker

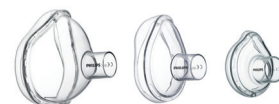

LiteTouch ansiktsmask är en löstagbar mask med en kudde som mjukt följer ansiktets konturer och vilar lätt mot huden. Den ger en bekvämare behandling och kan bidra till att minska läckage.

Referenser:

1. Gardenhire D., Arzu A., Dean H., Myers T. A guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists 3rd edition, American Association for Respiratory Care, 2013.
2. Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.
3. Slaton L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43;182-189.
4. Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Åtkomst i oktober 2017.
5. Med användning av 2,5 ml salbutamol.

