


# Slik bruker du systemet med kompressor og forstøver


En forstøver gjør flytende medisin om til en aerosol, slik at du kan puste den dypt inn i lungene. Tucker bruker forstøveren sin når han er hjemme med Sami. Husk å få en voksen til å hjelpe deg med å bruke og rengjøre forstøveren.

## Gjøre klart

- 1** Sett kompressoren på et bord.

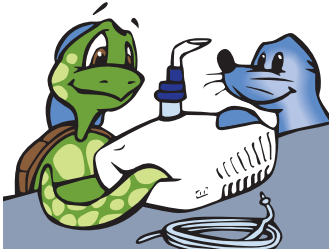

- 2** Koble kompressoren til et strømuttak.

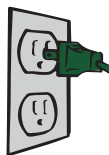

- 3** Koble den ene enden av slangen til medisinbeholderen og den andre enden til forstøveren.




## Ta medisinen

- 4** Hell medisinen i medisinbeholderen.




- 5** Slå på kompressoren, og sjekk at det kommer damp ut av munnstykket.

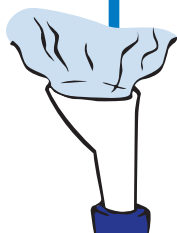

- 6** Sitt med rett rygg. Sett munnstykket i munnen, og pust rolig inn og ut. Når du bruker en maske, skal du puste inn og ut på samme måte.



- 7** Når forstøveren begynner å lage en sprutelyd, er behandlingen ferdig. Slå av kompressoren.

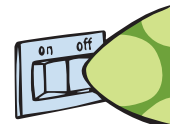


## Rengjøre kompressoren

- 1** Koble fra kompressoren før du rengjør den.

- 2** Sjekk filteret én gang i uken, og bytt det ut hvis det er skittent.




- 3** Tørk av utsiden på kompressoren én gang i måneden med en fuktig klut.

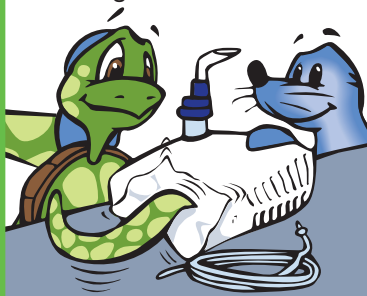

- 4** Oppbevares på et trygt og tørt sted.

## Rengjøre forstøveren

- 1** Etter hver bruk må du koble fra slangen og ta forstøveren fra hverandre.

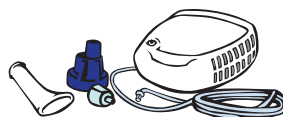

- 2** Vask forstøverdelerne med varmt såpevann.

- 3** Skyll dem med rent vann, og la dem lufttørke.

**Hvis du har en gjenbrukbar forstøver (den som er lyseblå)**

– Én gang i uken må alle deler (unntatt slangen og ansiktsmasken) kokes i vann med 2–3 dråper oppvaskmiddel i 10 minutter.



**Philips Healthcare er en avdeling  
av Royal Philips**

**Kontaktopplysninger**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Asia  
+49 7031 463 2254

Europa, Midtøsten, Afrika  
+49 7031 463 2254

Latin-Amerika  
+55 11 2125 0744

Nord-Amerika  
+1 425 487 7000  
+800 285 5585 (gratis, kun USA)

Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester PO20 2FT  
Storbritannia

Kundeservice  
+1 724 387 4000  
+800 345 6443 (gratis, kun i USA)

Philips Respironics Asia og Stillehavet  
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia  
+61 (2) 9947 0440  
+1300 766 488 (gratis, kun Australia)

Philips Respironics Kina  
+86 400 828 6665  
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike  
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italia  
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige  
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Sveits  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannia  
+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Respironics, Sami the Seal og Tucker the Turtle er varemerker  
for Koninklijke Philips N.V. og dets partnere.  
Med enerett.



Gå til [www.philips.com/asthma](http://www.philips.com/asthma) for å finne ut mer



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Med enerett.

Philips Healthcare forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og/eller til å avvikle produkter til enhver tid uten varsel, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av denne publikasjonen.

XX XX/XX/XX PN1552064