


Slik bruker du inhalatoren med et inhalasjonskammer

Et inhalasjonskammer kobles til inhalatoren og gjør det enklere å få medisin ned i lungene dine. Det er nyttig for både barn og voksne. Tucker bruker alltid et inhalasjonskammer med inhalatoren sin. Husk å få en voksen til å hjelpe deg med å bruke og rengjøre inhalasjonskammeret.

Gjøre klart

- 1 Ta av hetten på inhalatoren, og sett munnstykket inn i åpningen i gummienden av kammeret.

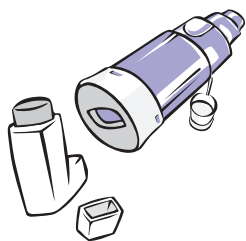

Hvis du bruker en ansiktsmaske

– Sett den godt fast på munnstykket.



- 2 Rist inhalatoren og kammeret 4–5 ganger.



- 3 Sett kammeret i munnen, lukk leppene godt rundt det, og pust ut.



Ta medisinen

- 4 Når du begynner å trekke pusten rolig gjennom munnen, trykker du én gang på inhalatoren.

- 5 Fortsett å puste inn rolig og så dypt du kan.

- 6 Hold pusten mens du teller til 10, og pust ut.

- 7 Hvis legen din vil at du skal ta to doser medisin, gjør du dette én gang til.



Hvis du bruker en ansiktsmaske

– Hold den godt over munnen og nesen. Trykk én gang for å få medisin inn i kammeret, og pust inn og ut gjennom munnen 6 ganger.




Rengjøre kammeret

- 1 Vask kammeret én gang i uken.

- 2 Ta av hetten på munnstykket.



- 3 Vri på munnstykket, og løft det av.

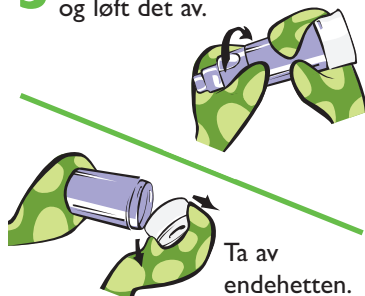

- 4 La disse delene ligge 10 minutter i varmt såpevann.



- 5 Skyll dem med rent vann, og la dem lufttørke.

- 6 Sett delene sammen igjen, og oppbevar dem på et trygt, tørt sted.

**Philips Healthcare er en avdeling
av Royal Philips**

Kontaktopplysninger

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Midtøsten, Afrika
+49 7031 463 2254

Latin-Amerika
+55 11 2125 0744

Nord-Amerika
+1 425 487 7000
+800 285 5585 (gratis, kun USA)

Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Storbritannia

Kundeservice
+1 724 387 4000
+800 345 6443 (gratis, kun i USA)

Philips Respironics Asia og Stillehavet
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia
+61 (2) 9947 0440
+1300 766 488 (gratis, kun Australia)

Philips Respironics Kina
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italia
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Sveits
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannia
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal og Tucker the Turtle er varemerker
for Koninklijke Philips N.V. og dets partnere.
Med enerett.



Gå til www.philips.com/asthma for å finne ut mer



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Med enerett.

Philips Healthcare forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og/eller til å utvikle produkter til enhver tid uten varsel, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av denne publikasjonen.

KS 9/10/18 PN1552003