

# Så här använder du din nebulisator-kompressor


En nebulisator förvandlar flytande medicin till en aerosol så att du kan andas in den, djupt ned i lungorna. Tucker använder sin nebulisator tillsammans med Sami när han är hemma. Kom ihåg att be en vuxen om hjälp med att använda och göra rent nebulisatorn.

## Gör dig redo

- 1 Ställ kompressorn på ett bord.



- 2 Sätt in kompressorns kontakt i ett vägguttag.

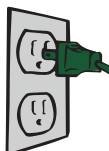

- 3 Sätt fast ena änden av slangen i medicinkoppen och den andra änden i kompressorn.




## Ta din medicin så här

- 4 Fyll medicinkoppen med din medicin.




- 5 Starta kompressorn och titta efter så att det kommer dimma från munstycket.

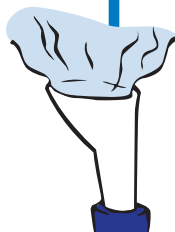

- 6 Sitt rak i ryggen. Stoppa in munstycket i munnen och andas långsamt in och ut. Om du använder en mask andas du in och ut på samma sätt.




- 7 När det kommer ett väsende bubbligt ljud från nebulisatorn är behandlingen klar. Stäng av kompressorn.

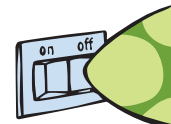


## Göra rent kompressorn

- 1 Dra ut kontakten till nebulisatorn innan du börjar göra rent den.
- 2 Kontrollera filtret en gång i veckan och byt det om det är smutsigt.

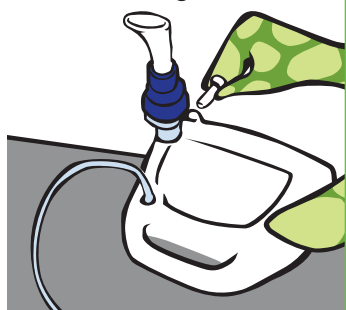


- 3 Torka av kompressorns utsida med en fuktig trasa en gång i månaden.

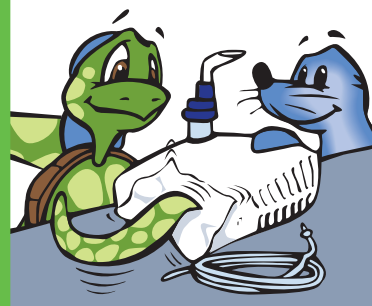

- 4 Förvara den på en säker, torr plats.

## Göra rent nebulisatorn

- 1 Efter varje användning ska du ta bort slangen och ta isär nebulisatorn.
- 2 Tvätta nebulisatorns delar med varmt vatten och diskmedel.
- 3 Skölj av med rent vatten och låt lufttorka.

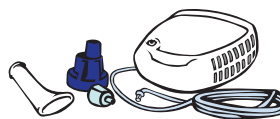

**Om du har en återanvändbar nebulisator (en ljusblå)**

– En gång i veckan ska du koka alla delarna (utom slangen och ansiktsmasken) i 10 minuter i vatten med 2–3 droppar diskmedel.



**Philips Healthcare är en del av  
Royal Philips**

**Kontakt**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[risekund@philips.com](mailto:risekund@philips.com)

Asien  
+49 7031 463 2254

Europa, Mellanöstern, Afrika  
+49 7031 463 2254

Latinamerika  
+55 11 2125 0744

Nordamerika  
+1 425 487 7000  
+1 800 285 5585 (avgiftsfritt, endast USA)

Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester PO20 2FT  
Storbritannien

Kundtjänst  
+1 724 387 4000  
+1 800 345 6443 (avgiftsfritt, endast USA)

Philips Respironics Asien-Stilla havet  
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien  
+61 (2) 9947 0440  
+1300 766 488 (avgiftsfritt, endast Australien)

Philips Respironics Kina  
+86 400 828 6665  
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike  
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien  
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige  
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannien  
+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Respironics, Sami the Seal och Tucker the Turtle är varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.



Mer information finns på [www.philips.com/asthma](http://www.philips.com/asthma)



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alla rättigheter förbehålles.

Philips Healthcare förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och/eller sluta sälja en produkt när som helst utan föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningskyldigt för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.

KS 7/12/18 PN1552123