


Hur du använder inhalatorn med en kammare


Kammaren (kallas även spacer) fungerar tillsammans med inhalatorn och gör det lättare att få ned medicinen i lungorna. De är användbara för personer i alla åldrar. Tucker använder alltid en kammare med sin inhalator. Kom ihåg att be en vuxen om hjälp med att använda och göra rent kammaren.

Gör dig redo

- 1 Ta bort locket från inhalatorn och sätt in munstycket i gummiöppningen i ena änden av kammaren.

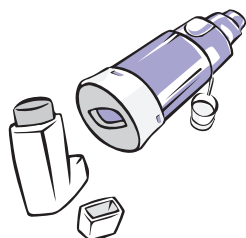

- Om du använder ansiktsmask**
– Sätt den stadigt på munstycket.

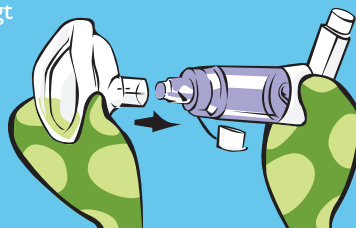

- 2 Skaka inhalatorn och kammaren 4-5 gånger.



- 3 Sätt kammaren i munnen, slut läpparna tätt runt öppningen, och andas ut.




Ta din medicin så här

- 4 Börja andas in sakta genom munnen och tryck samtidigt ned inhalatorn en gång.

- 5 Fortsätt att andas in så långsamt och djupt som du kan.

- 6 Håll andan medan du räknar till 10 och andas sedan ut.

- 7 Om din doktor har sagt att du behöver en puff till, gör samma sak igen.

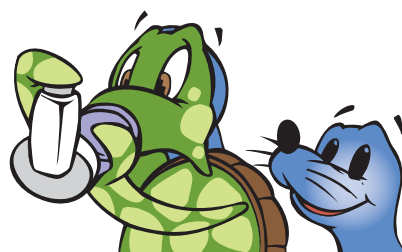

Om du använder ansiktsmask

– Tryck och håll den över näsa och mun. Spreja en puff med medicin i kammaren och andas in och ut genom munnen i 6 andetag.




Göra ren kammaren

- 1 Diska kammaren en gång i veckan.

- 2 Ta bort locket från munstycket.



- 3 Vrid på munstycket och ta av det.

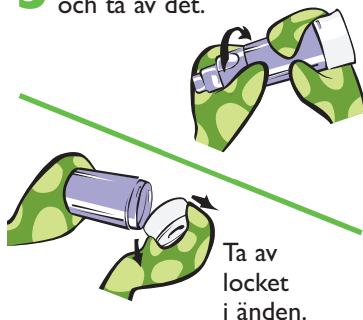

Ta av locket i änden.

- 4 Blötlägg delarna i 10 minuter i varmt vatten med diskmedel.



- 5 Skölj av med rent vatten och låt delarna lufttorka.

- 6 Sätt ihop delarna igen och förvara på en säker, torr plats.

**Philips Healthcare är en del av
Royal Philips**

Kontakt

www.philips.com/healthcare
risekund@philips.com

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mellanöstern, Afrika
+49 7031 463 2254

Latinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000
+1 800 285 5585 (avgiftsfritt, endast USA)

Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Storbritannien

Kundtjänst
+1 724 387 4000
+800 345 6443 (avgiftsfritt, endast USA)

Philips Respironics Asien-Stilla havet
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien
+61 (2) 9947 0440
+1300 766 488 (avgiftsfritt, endast Australien)

Philips Respironics Kina
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannien
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal och Tucker the Turtle är varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.



Mer information finns på www.philips.com/asthma



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alla rättigheter förbehålles.

Philips Healthcare förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och/eller sluta sälja en produkt när som helst utan föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningsskyldigt för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.

KS 7/12/18 PN1552023