

# Como utilizar o sistema nebulizador compressor Sami the Seal


Um nebulizador compressor transforma o medicamento líquido num aerossol para que o possas inspirar profundamente para dentro dos teus pulmões. O Tucker usa o Sami the Seal quando está em casa. Não te esqueças de pedir a um adulto ajuda para utilizares o teu Sami the Seal.

## Preparação

- 1 Colocar o compressor em cima de uma mesa.



- 2 Ligar o compressor a uma tomada elétrica.

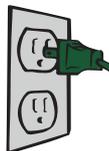

- 3 Ligar uma extremidade do tubo ao copo nebulizador e a outra extremidade ao compressor.




## Tomar a medicação

- 4 Encher o copo nebulizador com a medicação.




- 5 Ligar o compressor e confirmar se sai vapor do bucal.

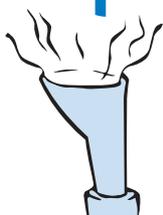

- 6 Sentar direito. Colocar o bucal na boca e inspirar e expirar lentamente. Se for usada uma máscara, inspirar e expirar da mesma forma.




- 7 Quando o nebulizador começar a fazer um ruído “borbulhante”, o tratamento terminou. Desligar o compressor.

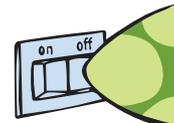

## Limpar o compressor

- 1 Desligar o compressor antes de limpar.
- 2 Inspeccionar o filtro uma vez por semana e substituir se estiver sujo.

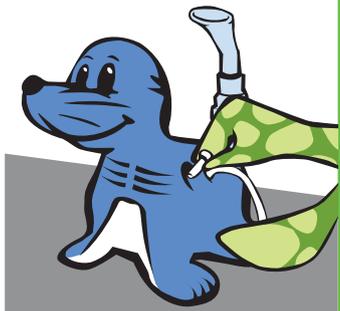


- 3 Limpar a parte exterior do compressor uma vez por mês com um pano húmido.



- 4 Guardar num lugar seco e seguro.

## Limpar o nebulizador

- 1 Depois de cada utilização, desligar o tubo e desmontar o nebulizador.

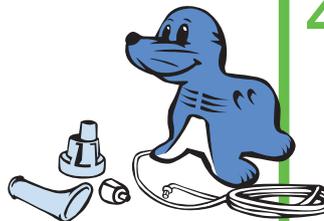

- 2 Lavar as peças do nebulizador com água quente com detergente.

- 3 Passar por água limpa e deixar secar ao ar.

- 4 Uma vez por semana, ferver todas as peças (menos o tubo e a máscara facial) em água com 2-3 gotas de detergente da loiça durante 10 minutos.



Para falar conosco

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Ásia  
+49 7031 463 2254

Europa, Médio Oriente, África  
+49 7031 463 2254

América Latina  
+55 11 2125 0744

América do Norte  
+1 425 487 7000  
800 285 5585 (toll free, US only)

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK

Philips Respironics Ásia e Pacífico  
+65 6882 5282

Philips Respironics Austrália  
+61 (2) 9947 0440

Philips Respironics China  
+86 400 828 6665  
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics França  
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Iberia  
+34 91 566 90 00

Philips Respironics Itália  
+39 039 203 1

Philips Respironics Suécia  
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Suíça  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Reino Unido  
+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Philips Respironics, SideStream, Sami the Seal e Tucker a Tartaruga são marcas comerciais da Koninklijke Philips N.V. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Visita [www.philips.com/asthma](http://www.philips.com/asthma) para saber mais



© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de alterar as especificações e/ou de descontinuar um produto a qualquer momento sem aviso nem obrigação e não é responsável por quaisquer consequências resultantes da utilização desta publicação.

MCI 4106750 PN448990