



PHILIPS

Astmabehandling

Hjelper deg å holde **kontroll på astmaen**

Denne veiledningen utforsker Philips' astmabehandlingsløsninger som hjelper deg med å håndtere astma, slik at du kan fokusere på det som betyr mest.

Spør helsepersonell eller på apotek dersom astmaprodukter som disse kan hjelpe deg å holde kontrollen.



Philips OptiChamber Diamond inhalasjonskammer med ventil



Inhalasjonskamre er rørlignende tilbehør som kobles til en inhalator og hjelper til med å levere mer medisiner til lungene, der det trengs. Ventilene i inhalasjonskammeret holder aerosolen inne i kammeret en kort periode. Ventilene åpnes for å frigjøre medisinen når du puster inn.

OptiChamber Diamond er diskret, bærbar og liten nok til at du kan ta den med deg.

- OptiChamber Diamond har blitt designet for å forbedre medisinerings. Det anti-statiske kammeret suspenderer aerosolen lenger, noe som betyr at du har mer tid til å puste inn medisinen^{2,3}
- Lavmotstandsventiler lar deg puste lett gjennom kammeret med lave strømningshastigheter³
- Utåndingsventilen gir en visuell indikasjon når du puster ut, for å hjelpe deg med å levere medisin når du puster inn²



Philips PersonalBest PEF-måler



En PEF-måler er en rimelig, bærbar, håndholdt enhet som brukes til å måle hvor godt luften beveger seg ut av lungene. Måling av toppstrømmen ved hjelp av denne måleren er en viktig del av behandlingen av astmasymptomene og forebyggingen av astmaanfall, og det bør være en del av din personlige astmahandlingsplan.⁴

PersonalBest er en lett, selvstendig og bærbar enhet som enkelt lar deg måle toppstrøm når du trenger det.

- Målinger med tre fargesoner som hjelper deg med å overvåke tilstanden din
- Et utfoldbart håndtak holder hånden vekk fra indikatorene og gir en god teknikk for riktig avlesning
- Håndtaket blir til en solid oppbevaringsboks som beskytter måleren



Philips InnoSpire forstøvere



Hvis du eller barnet ditt har blitt foreskrevet flytende medisiner for inhalasjon, brukes forstøvere til å gjøre væsken om til en fin tåke som gjør det mulig å nå dypt inn i lungene der det kan være mest effektivt.

InnoSpire-serien omfatter raske, effektive og pålitelige bærbare og stasjonære forstøvere som tilbyr behandlinger på bare 4 minutter.⁵

- InnoSpire Elegance, Essence og Deluxe er designet for bruk i hjemmet
- InnoSpire Go og Mini tilbyr bærbar forstøverbehandling
- SideStream-forstøvere brukes sammen med Elegance, Essence, Deluxe, Mini og begge typer Philips pediatrike forstøvere. De er svært effektive og kan brukes som forstøver til de vanligst foreskrevne inhalasjonslegemidlene




Philips pediatrike forstøvere



Vi har skapt to koselige figurer som gir barnet ditt pålitelige, raske og brukervennlige behandlinger på bare 6 minutter.⁵

- Vennlige figurer for å oppmuntre barn til å ta behandlingen
- Pålitelig forstøverbehandling bygget på over 30 års erfaring
- Stabil, lett og enkel å bruke – en perfekt kombinasjon for barn

Philips LiteTouch- masker

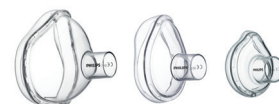

Den avtakbare LiteTouch-ansiktsmasken har en myk konturert pute som passer lett og hviler forsiktig på ansiktet for å gi en mer behagelig behandling, og kan bidra til å redusere lekkasje.

Referanser:

1. Gardenhire D., Arzu A., Dean H., Myers T. A guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists 3rd edition, American Association for Respiratory Care, 2013.
2. Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.
3. Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43:182-189.
4. Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Tilgjengelig okt. 2017.
5. Bruk av 2,5 ml salbutamol.

