




Configuración Circuito Pasivo

- 1 Descripción general
- 2 Configuración del circuito
- 3 Pantalla de configuración
- 4 Configuración de prescripción

1

Descripción general

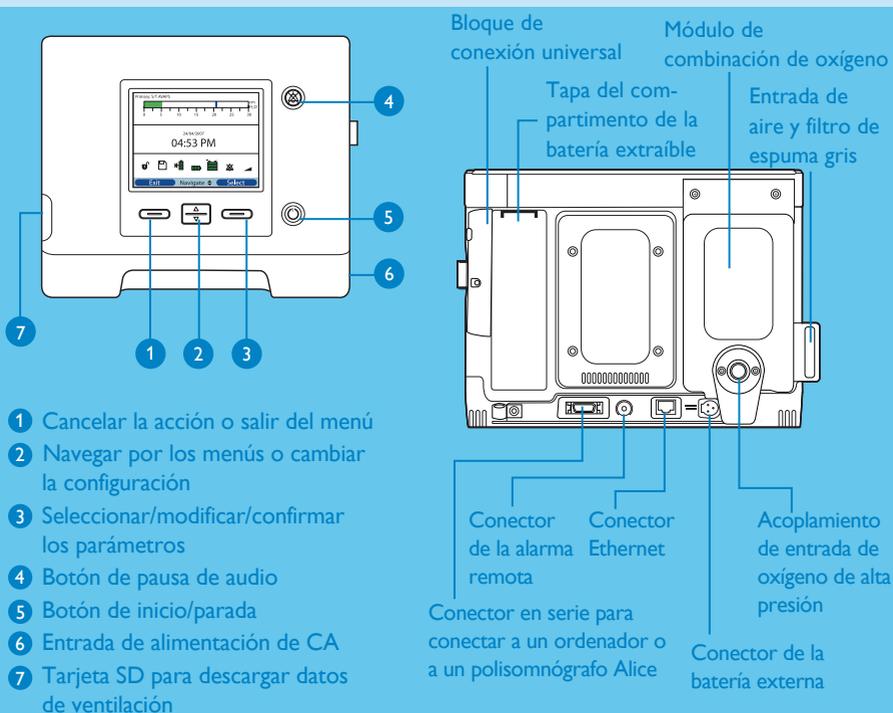

Símbolos e iconos



Modo de acceso completo



Tarjeta SD insertada en el ventilador



Pausa de audio activa



Rampa activa



Estado de la batería extraíble opcional



Estado de la batería interna



Estado de la batería externa




Batería cargando

2

Configuración del circuito

Antes de utilizar el sistema Trilogy202, es necesario configurar el tipo de circuito.

Circuito de conector espiratorio pasivo

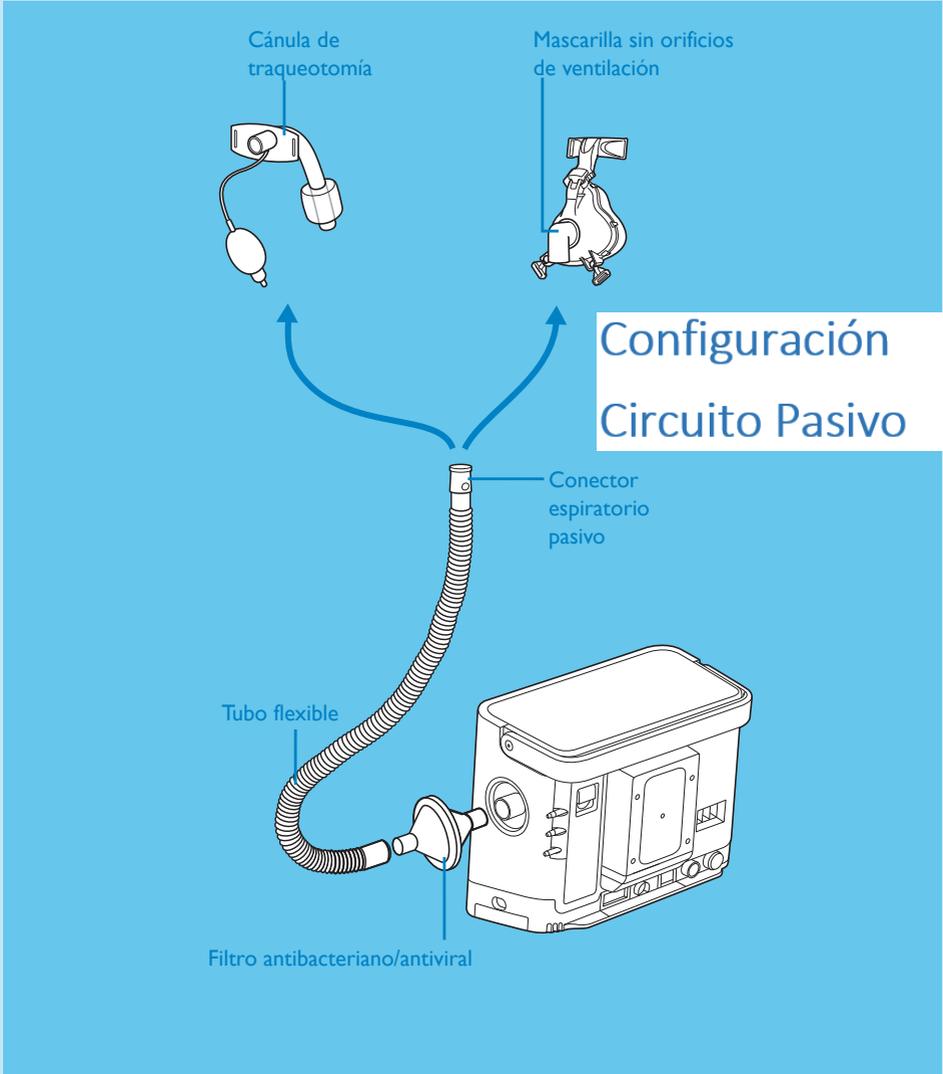


En la pantalla Configuración, seleccione “Pasivo” como tipo de circuito.

3

Pantalla de configuración

Cómo acceder a configuración en espera

Asegúrese de que Trilogy 202 está apagado antes de realizar los siguientes pasos.

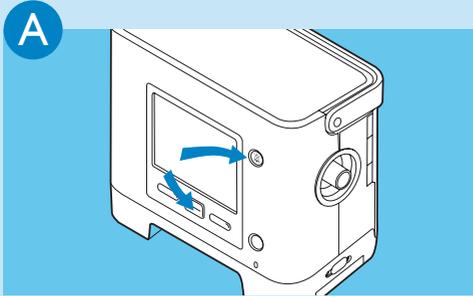


Pulse y mantenga pulsado  y  durante unos segundos para acceder a la pantalla **Configuración**



Seleccione **Configuración y alarmas**


Esta pantalla de configuración nos permite establecer el modo ventilatorio, parámetros de ventilación y ajustes de alarmas mientras el ventilador está en espera.

Es importante no modificar el Tipo de Circuito. Siempre debe usarse Circuito Pasivo. El tipo de circuito aparece indicado siempre en la esquina superior izquierda de la pantalla, seguida por el modo ventilatorio en uso.

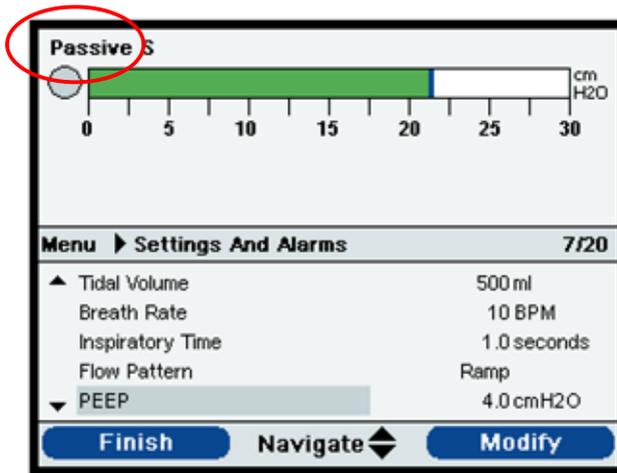

Configuración del acceso a menús (se puede realizar con o sin el paciente)

Para habilitar el acceso completo a la configuración

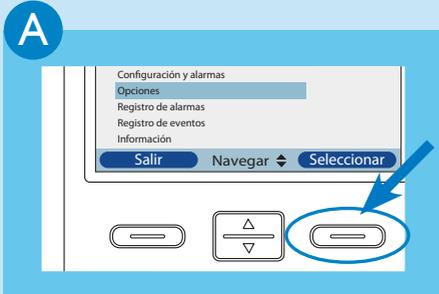


Navegue hasta **Opciones** y pulse **Seleccionar**




Pulse **Modificar** para acceder a **Acceso a menús**



Utilice  para seleccionar el tipo de acceso **Completo** o **Limitado** y pulse **Aceptar** para confirmar

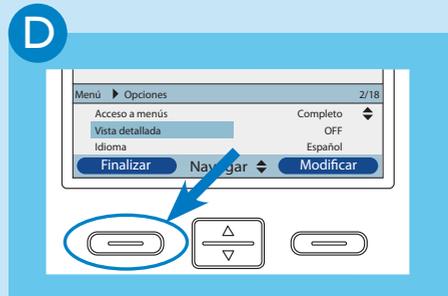

Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la **Pantalla inicial**

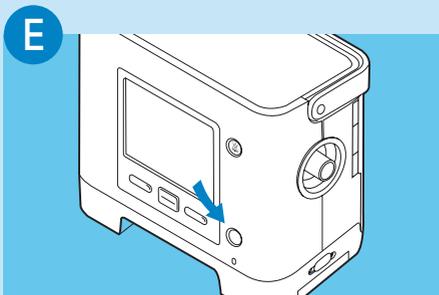


Pulse  para comenzar la terapia o continúe navegando por el menú para configurar los parámetros de ventilación

4


Configuración de prescripción

A

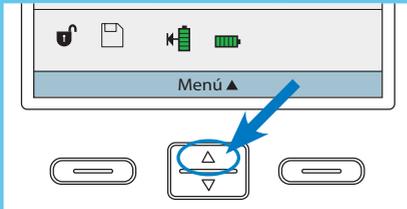


En la pantalla principal, pulse **Menú**

B

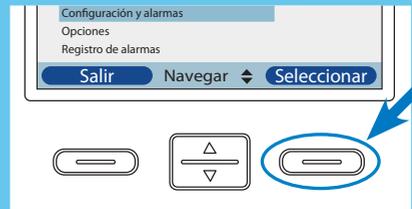

Seleccione **Configuración y alarmas**

E

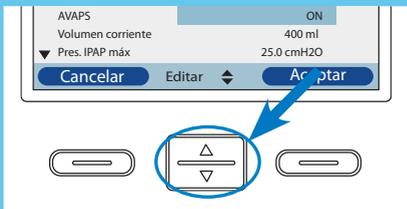


Utilice  para cambiar el valor o el estado de la configuración


F




Pulse **Aceptar** para validar la nueva configuración

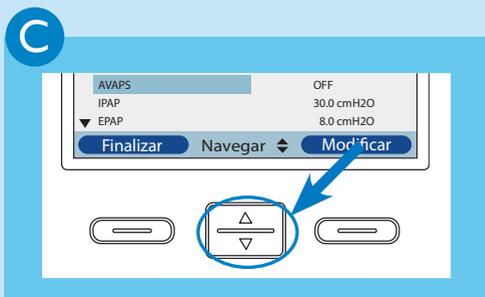

Desplácese hacia arriba y hacia abajo mediante  para navegar por las configuraciones y alarmas

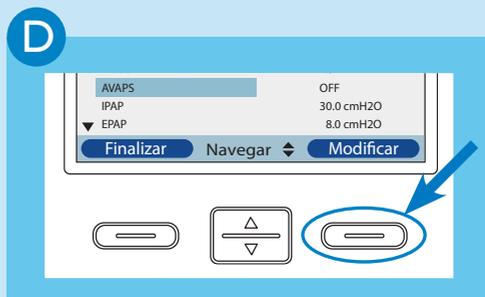


Pulse **Modificar** para cambiar el parámetro resaltado en azul.

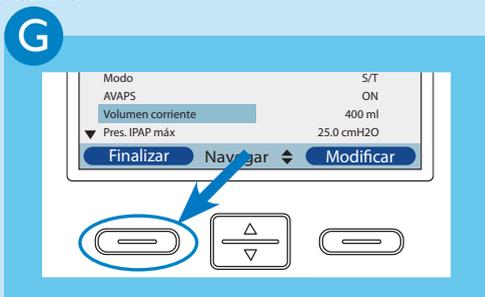

Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la pantalla principal.

Prescripción doble

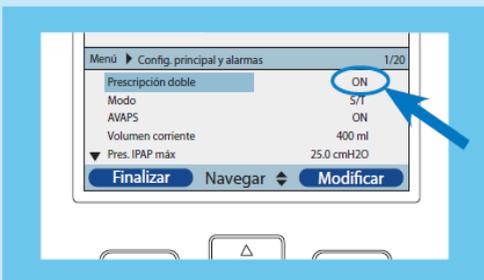

Si **Prescripción doble** está habilitado, ambas prescripciones deberán ajustarse tal y como se explicó anteriormente



Configure tanto las prescripciones principales como las secundarias