




Guía de instalación

- 1 Generalidades
- 2 Procedimiento de desbloqueo
- 3 Instalación del circuito
- 4 Instalación de la ventilación

1

Generalidades

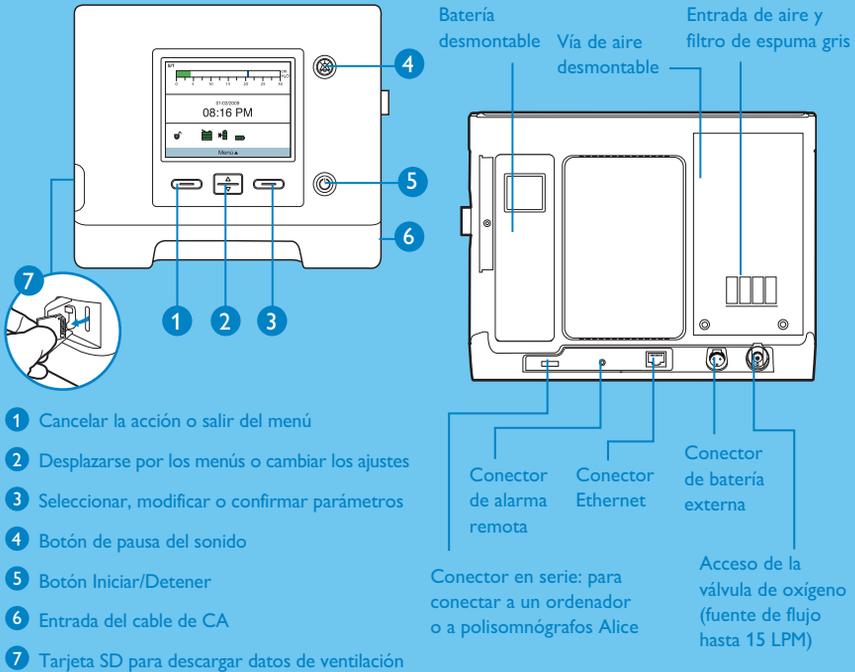


Símbolos e iconos

	Entorno del médico, modo de acceso completo		Estado de la batería desmontable
	Tarjeta SD insertada en el ventilador		Estado de la batería interna
	Pausa de sonido activada		Estado de la batería externa
	Rampa activada		La batería se está cargando


2

Procedimiento de desbloqueo

Para acceder al menú completo y cambiar los ajustes

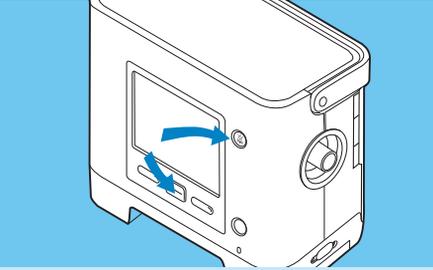


Mantenga pulsados  y  durante unos segundos para acceder a la página de instalación.

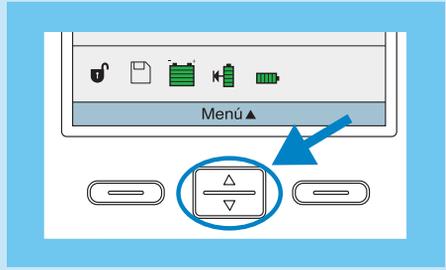

Si aparece  en la pantalla principal, ya está activado el acceso completo a los menús. Pulse  para acceder al menú.

Para mantener el acceso completo a los ajustes

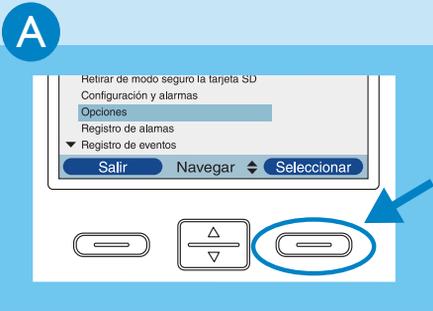


Vaya a **Opciones** y pulse **Seleccionar**.



Pulse **Modificar** para ir a **Acceso a menús**.



Cambia a **Completo** con  y pulse **Aceptar** para confirmar.

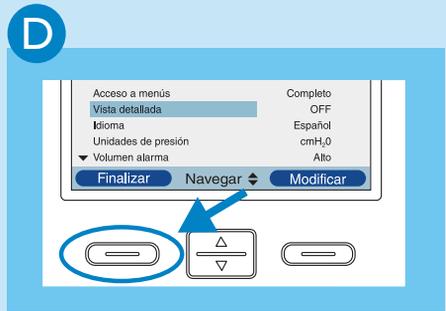


Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la pantalla inicial.

3


Instalación del circuito

Antes de utilizar el **Trilogy100**, se debe configurar el tipo de circuito

Instalación con una válvula espiratoria

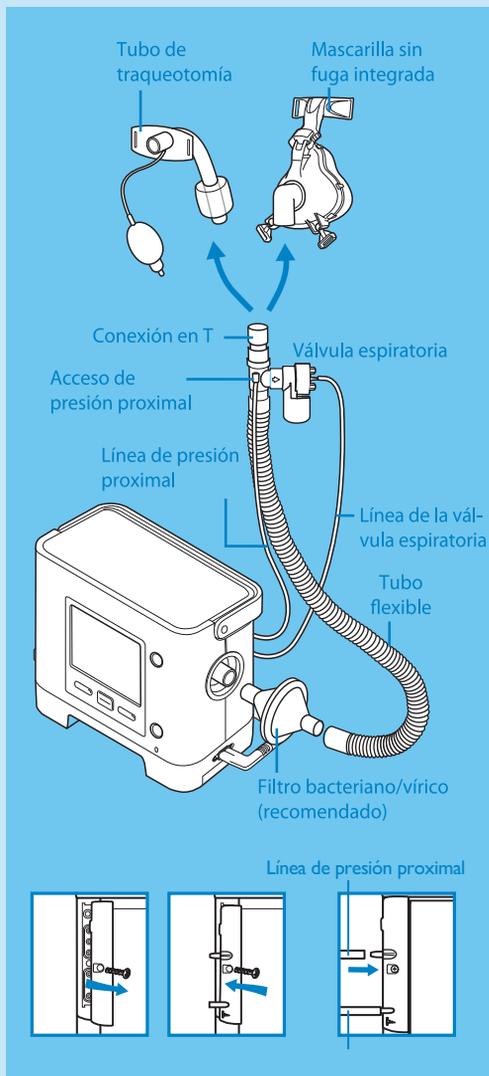


Instalación con un orificio de exhalación

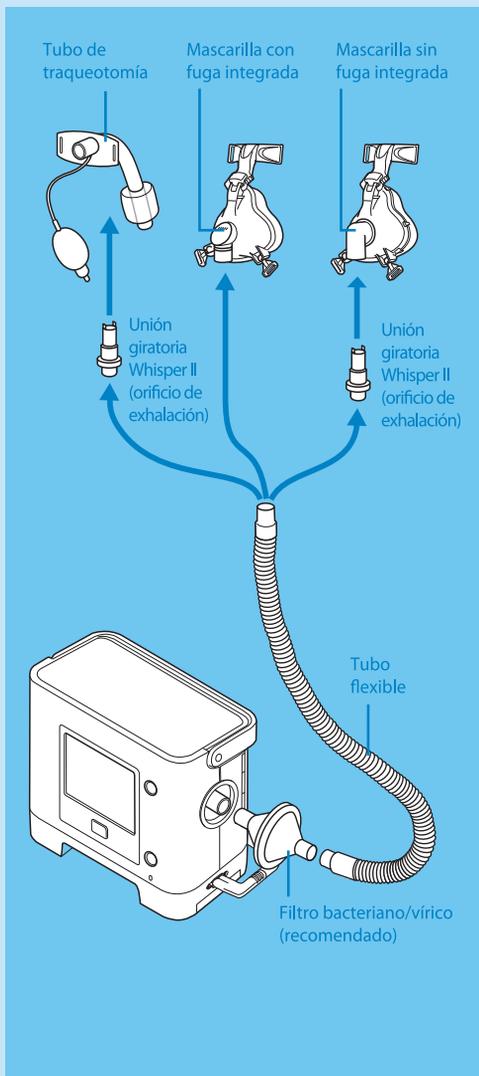

Compruebe que el tipo de circuito esté configurado correctamente.

Asegúrese de que el **Trilogy100** esté apagado antes de realizar los siguientes pasos:

A

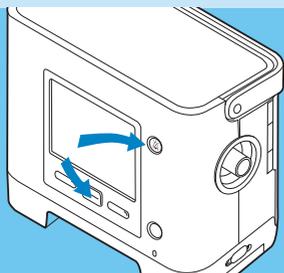


Mantenga pulsados  y  durante unos segundos para acceder a la página de instalación.

B




Seleccione **Ajustes y alarmas**.

C

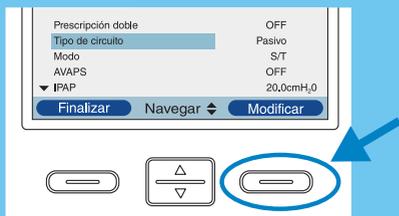


Vaya a **Tipo de circuito** y pulse **Modificar**.

D

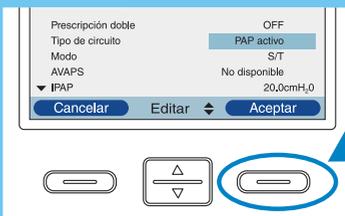

Utilice  para seleccionar **PAP activa** (instalación con una válvula espiratoria) o **Pasiva** (instalación con un orificio de exhalación) y, a continuación, pulse **Aceptar** dos veces para confirmar.

E

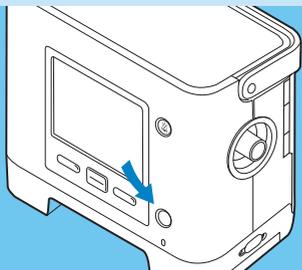


Pulse  para activar el dispositivo o continúe desplazándose por el menú para configurar los parámetros de ventilación.

4

Instalación de la ventilación

A

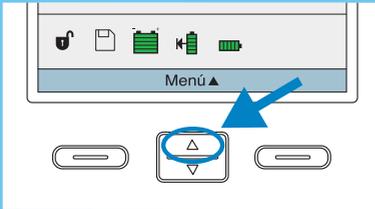


En la pantalla principal, pulse **Menú**.

B




Seleccione **Ajustes y alarmas**.

E

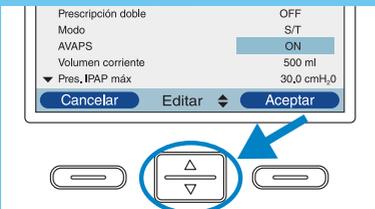


Utilice  para cambiar el valor o el estado del ajuste.

F

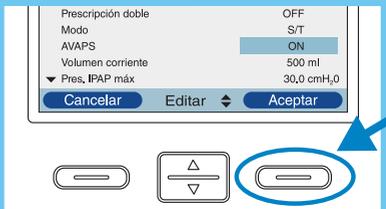

Pulse **Aceptar** para validar el nuevo ajuste.


Doble prescripción

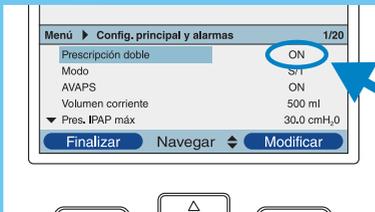


Si está activada la **Doble prescripción**, es necesario ajustar ambas prescripciones tal como se describió anteriormente.




Dos prescripciones para configurar.

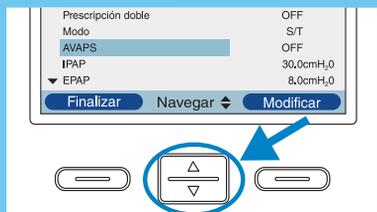C

Utilice  para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los diferentes ajustes y alarmas.

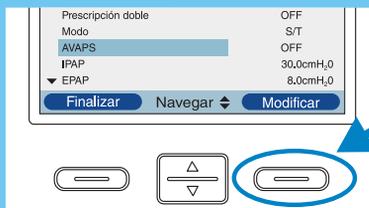D

Pulse **Modificar** para cambiar el parámetro resaltado en azul.

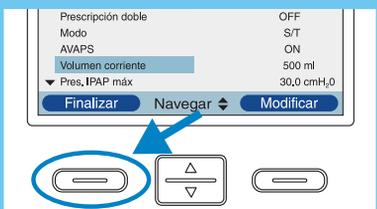G

Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la pantalla principal.

**Philips Healthcare es parte de
Royal Philips Electronics**

Contacto

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Fax: +31 40 27 64 887

Asia

+852 2821 5888

Europa, Oriente Medio, África

+49 7031 463 2254

América Latina

+55 11 2125 0744

Norteamérica

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane

Murrysville, PA 15668

Atención al cliente

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)

Respironics Europa, África, Oriente

Medio

+33 1 47 52 30 00

Respironics Alemania

+49 8152 93 06 0

Respironics Francia

+33 2 51 89 36 00

Respironics Italia

+39 03 62 63 43 1

Respironics Reino Unido

+44 800 1300 845

Respironics Suiza

+41 62 745 1750

Respironics Asia Pacífico

+65 6298 1088

Respironics Australia

+61 2 9666 4444

www.philips.com/respironics



© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho a modificar las especificaciones y a discontinuar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación, y no se hace responsable de ninguna consecuencia derivada del uso de esta publicación.

MCI 4102515 PN448907