



Guía de inicio rápido

- 1 Generalidades
- 2 Procedimiento de desbloqueo
- 3 Instalación del circuito
- 4 Instalación de la ventilación


PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity


1

Generalidades

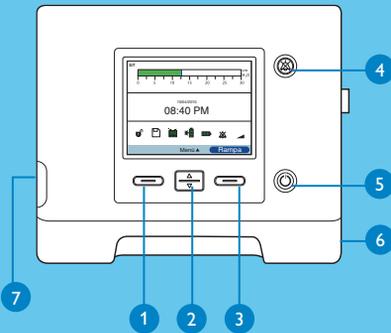

- 1 Cancelar la acción o salir del menú
- 2 Desplazarse por los menús o cambiar los ajustes
- 3 Seleccionar, modificar o confirmar parámetros
- 4 Botón de pausa del sonido
- 5 Botón Iniciar/Detener
- 6 Entrada del cable de CA
- 7 Tarjeta SD para descargar datos de ventilación

Bloque de puertos
 Entrada de aire y filtro de espuma gris
 Batería desmontable
 Vía de aire desmontable

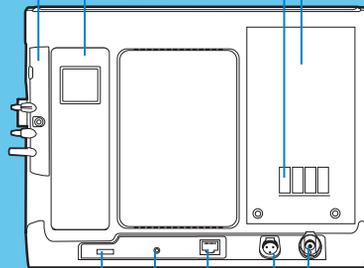

- Conector de llamada al personal de enfermería
 Conector en serie: para conectar a un ordenador o a polisomnógrafos Alice
 Conector Ethernet
 Conector de batería externa
 Acceso de la válvula de oxígeno (fuente de flujo hasta 15 LPM)

Símbolos e iconos

 Entorno del médico, modo de acceso completo

 Tarjeta SD insertada en el ventilador

 Pausa de sonido activada

 Rampa activada

 Estado de la batería desmontable

 Estado de la batería interna


 Estado de la batería externa

 La batería se está cargando


2

Procedimiento de desbloqueo

Para acceder al menú completo y cambiar los ajustes

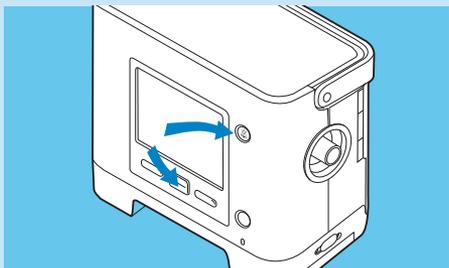


Mantenga pulsados  y  durante unos segundos para acceder a la página de **instalación**.

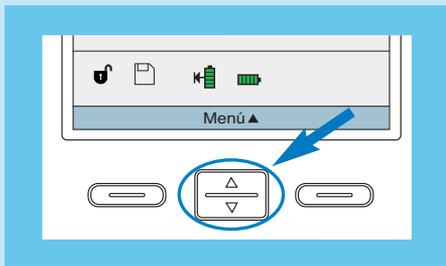

Si aparece  en la pantalla principal, ya está activado el acceso completo a los menús. Pulse  para acceder al menú.

Para mantener el acceso completo a los ajustes

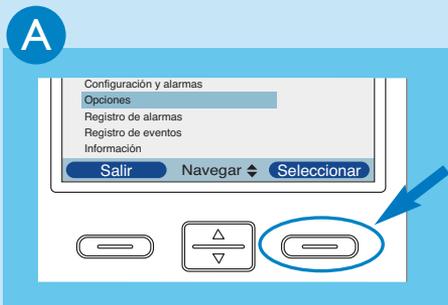


Vaya a **Opciones** y pulse **Seleccionar**



Pulse **Modificar** para ir a **Acceso a menús**.



Cambia de **Completo** con  y pulse **Aceptar** para confirmar.

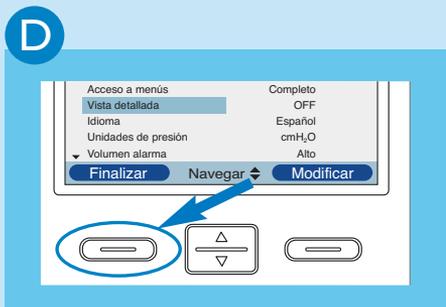


Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la pantalla inicial.

3

Instalación del circuito


Antes de utilizar el Trilogy200, se debe configurar el tipo de circuito.

Circuito de orificio de exhalación pasiva

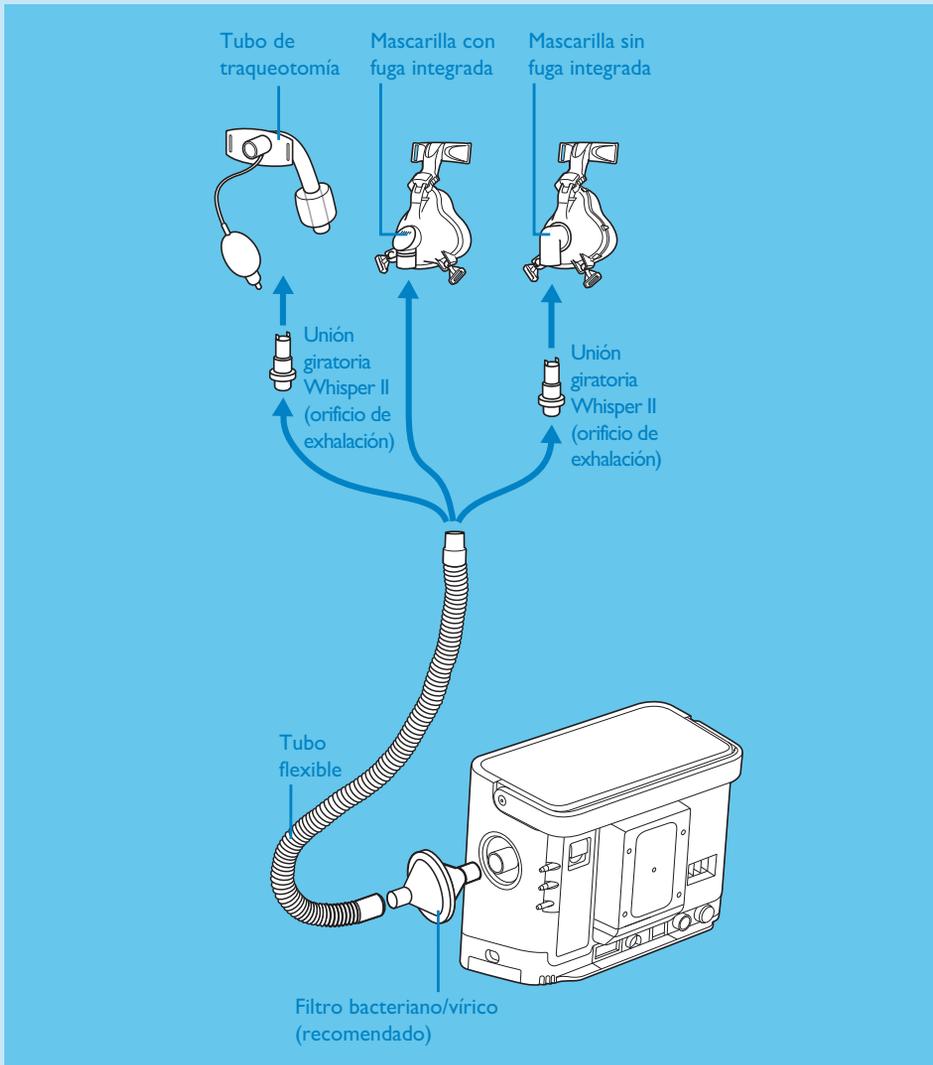

En el menú de instalación, seleccione “Pasiva” en Tipo de circuito.

Circuito de válvula espiratoria activa con presión proximal en las vías respiratorias

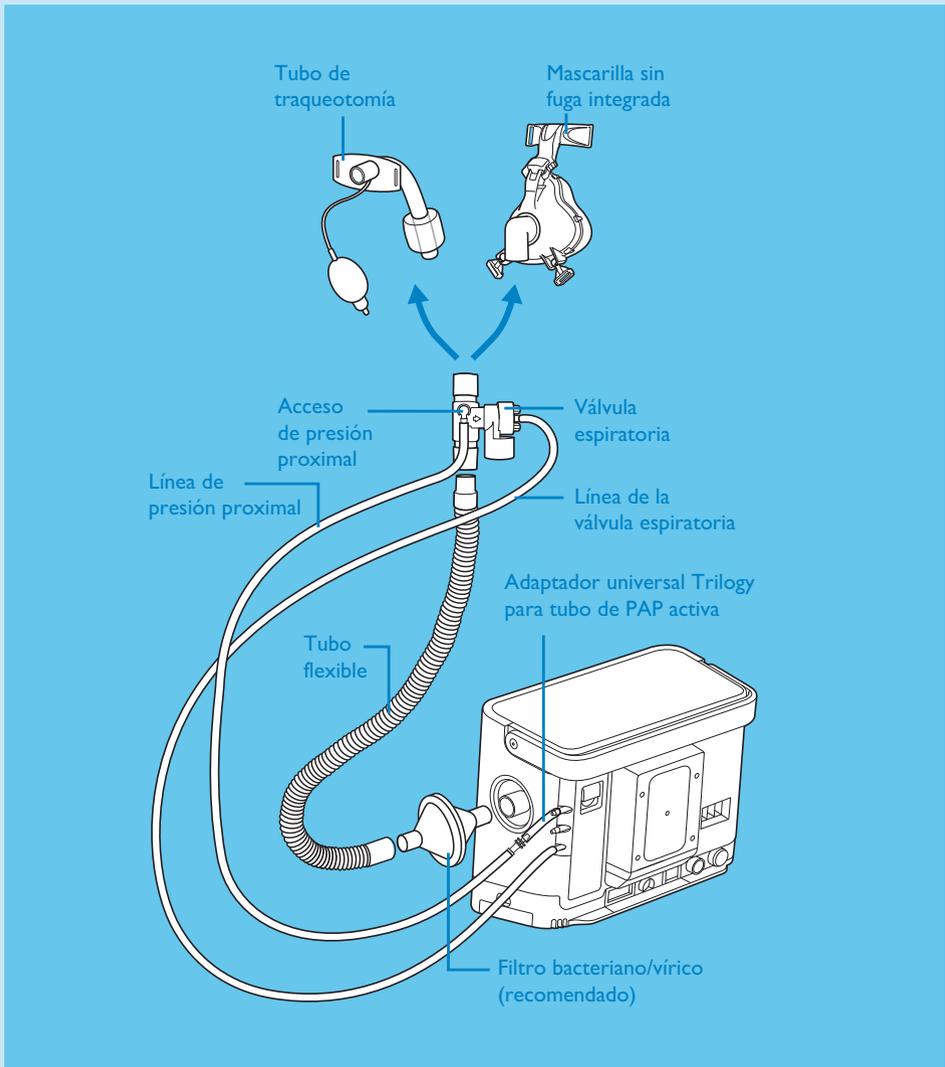


En el menú de instalación, seleccione “PAP activa” en Tipo de circuito.

3

Instalación del circuito (cont.)


Circuito de válvula espiratoria activa con sensor de flujo

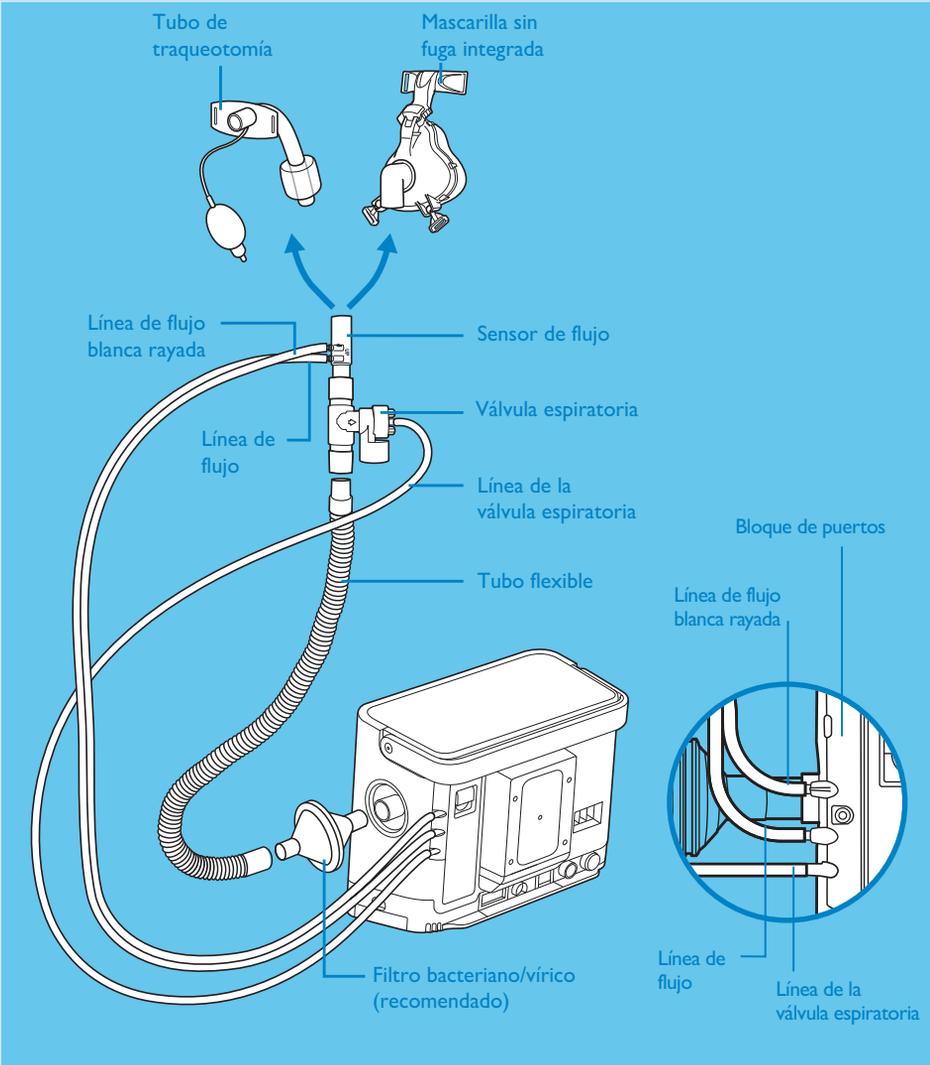

En el menú de instalación, seleccione “Flujo activo” en Tipo de circuito.

Configuración del tipo de circuito


Asegúrese de que el Trilogy200 esté apagado antes de realizar los siguientes pasos:

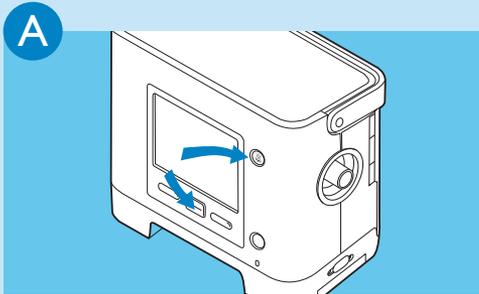

Mantenga pulsados  y  durante unos segundos para acceder a la página de **instalación**.



Seleccione **Configuración y alarmas**.

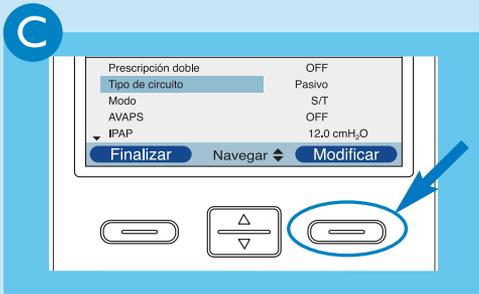

Vaya a **Tipo de circuito** y pulse **Modificar**.




Utilice  para seleccionar **PAP activo, Flujo activo** o **Pasivo** y, a continuación, pulse **Aceptar** dos veces para confirmar.

4

Instalación de la ventilación

A

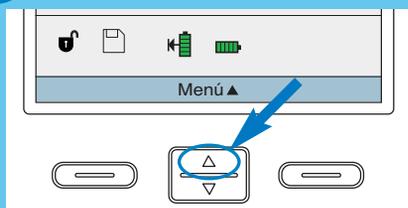

En la pantalla principal, pulse **Menú**.

B




Seleccione **Configuración y alarmas**.

E




Utilice  para cambiar el valor o el estado del ajuste.

F

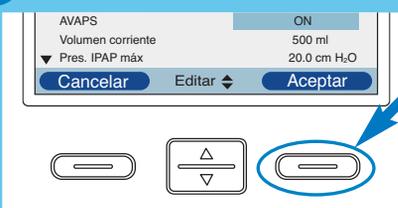


Pulse **Aceptar** para validar el nuevo ajuste.


Prescripción doble

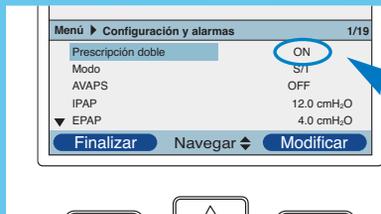


Si está activada la **Prescripción doble**, es necesario ajustar ambas prescripciones tal como se describió anteriormente.

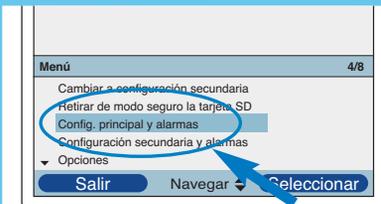


Dos prescripciones para configurar.

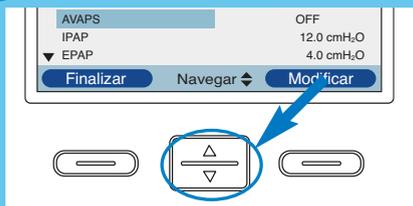C

Utilice  para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los diferentes configuraciones y alarmas.

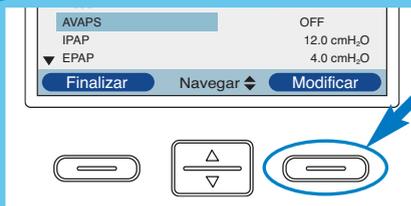D

Pulse **Modificar** para cambiar el parámetro resaltado en azul.

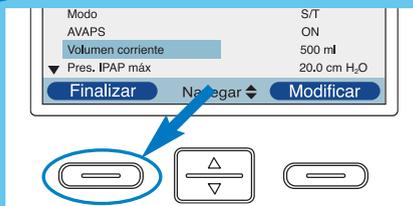G

Pulse **Finalizar** y **Salir** para volver a la pantalla principal.

**Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics**

Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacifico
+65 6882 5282

www.philips.com/respironics

Respironics, Trilogy, Whisper Swivel y Alice son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visítenos en www.philips.com/respironics



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Esta guía de inicio rápido del Trilogy200 no reemplaza al manual de operación del Trilogy200.

Broudy AE 11/2/10 MCI 4103362 PN 1070815